



Tec-Onomic





Qualität und Leistung



C+P gehört zu den führenden Einrichtungsherstellern. Durch kontinuierliche Innovationsarbeit, stete Investitionen und marktgerechte Produkte steht C+P für Qualität und Kompetenz. Dazu tragen modernste Technologien und Fertigungs-

methoden ebenso wie engagierte, erfahrene und flexible Mitarbeiter bei.

Dank unseres umfangreichen Know-hows können sich unsere Kunden auf optimale Lösungen verlassen.

C+P – der starke Partner für Laboreinrichtungen

C+P bietet ein schlüssiges Partnerschaftskonzept, das Produktlösungen und Dienstleistungen beinhaltet:

Laboreinrichtungslösungen für unterschiedliche Zielgruppen und Anwendungsbereiche

Projektunterstützung von der Akquisition über die Planung bis zur Endmontage und Übergabe

Beratung und Betreuung durch geschulte Mitarbeiter

Interessantes Möbel-Ergänzungsprogramm für umfassende Problemlösungen

C+P hat die Kompetenz als Spezialist für Laboreinrichtungen:

Langjähriges Know-how mit Projekten für Kunden aus Industrie, Forschung, Qualitätssicherung und anderen Einrichtungen

Systematisierte Problemlösungen auch für schwierige Anforderungen und Raumvorgaben

Hoher Qualitätsstandard, durch hochwertige Produktionsfaktoren und Fertigungsanlagen nach neuestem technischem Stand

Qualifizierte, erfahrene Mitarbeiter mit hoher Kompetenz in Planung, Konstruktion, Fertigung und Montage

Mit Sinn und Verstand - Das C+P Logistik-Konzept

Logistik-Konzept mit Direktanlieferung an die gewünschte Abladestelle bzw. Verwendungsstelle

Anlieferung und Montage durch ausgebildetes Personal

Sicherer Versand mit speziell ausgestatteten Möbel-LKWs





*Blick in das Labor:
Klare, eindeutig auf-
geteilte Arbeits-
bereiche*

Objektbeispiel Axaron AG

Bei der Axaron AG in Heidel-
berg wurde unser Komplett-
einrichtungs-Erfolgskonzept in die
Tat umgesetzt:

Vor-Ort-Beratung und
Betreuung des Kunden

Komplette 3D-Einrichtungs-
planung

Nachträgliche Integration der
gewünschten Laboreinrich-
tung in ein Bürogebäude

Lieferung, Montage und
Medieninstallation der
Laboreinrichtung sowie

- der Büroeinrichtung,
- des Empfangsbereichs,
- der Bibliotheksausstattung

Alle Einrichtungen basieren
auf einem gemeinsam mit
dem Kunden erarbeiteten Farb-
konzept und sind harmonisch
aufeinander abgestimmt.

*Einsatz hängender
Energiesäulen, die
stufenlos in der Höhe
verstellbar sind*



*Tischabzüge mit
AIR-TEC Abluftsystem
und unterschiedlichen
Versuchsanordnungen*

Die C+P
Empfangstheke



Durchgehende Kom-
pletteinrichtung bis
hinein in den Büro-
bereich ...



... und die Schulungsräume



Optimale Raumaussnutzung
bei der Flurgestaltung mit
C+P Schiebetürenchränken



Das Gebäude der
Axaron AG



Objektbeispiel Herborner Metallveredelung

Funktionale Arbeitsplätze auch bei beengten Raumverhältnissen: Blick ins Labor der Herborner Metallveredelung

Die Firma Herborner Metallveredelung ist ein Spezialist für den Bereich der Oberflächenbehandlung von metallischen Werkstoffen.

Der hohe Anspruch dieses Unternehmens an die Qualität seiner Fertigung wird daher konsequent im hauseigenen Labor geprüft und bestätigt. Bei der anstehenden Neueinrichtung des Qualitäts-Kontroll-Labors entschied sich das Unternehmen für das Laborsystem TEC-ONOMIC.

Insbesondere die herausragenden Eigenschaften von TEC-ONOMIC konnten die Herborner Metallveredelung rundum überzeugen:

Funktionalität und Ergonomie

überzeugende Ablufttechnik mit dem Abluftsystem AIR-TEC

maximale Platzausnutzung z.B. durch Einsatz von Freiformtischplatten

Flexibilität der Unterbauten in der Wahl der Frontgestaltung sowie der Innenausstattung

... und nicht zuletzt die motivationssteigernde Abstimmung von Design und Farbe

Die erfolgreiche Projektabwicklung wurde durch die gemeinsame Beratung und Betreuung mit einem C+P Fachhandelspartner gewährleistet.





Der Einsatz von Freiformplatten - ein wesentliches Element bei der maximalen Platzausnutzung.

Raumnutzung
in der Höhe:
gerade im kleinen
Labor von be-
sonderer Wichtigkeit



Optimale Nutzung
von Raumecken
durch ergonomisch
gestaltete Tischplatten

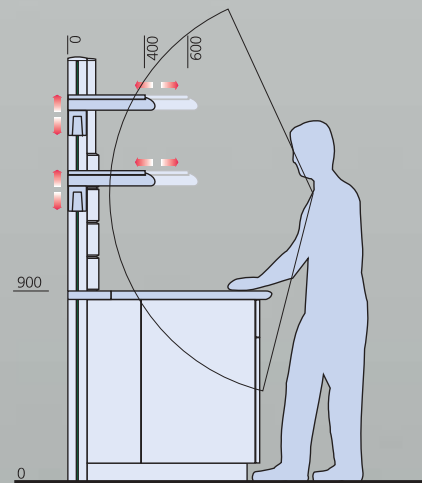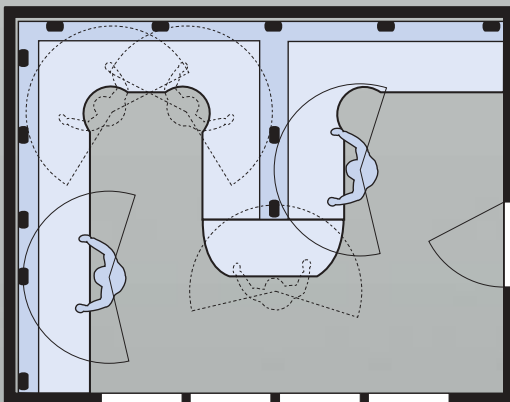

Thema: Effiziente Raumnutzung

Unter ergonomischen Aspekten
unverzichtbar:

Verbesserte Raumnutzung
auch bei problematischen
Raumvorgaben

Durch zusätzliche Raum-
nutzung in der Höhe ist ein
optimaler Zugriff auf Geräte
und Ablagen möglich

Zusammenhängende Arbeits-
flächen für stetig zu optimie-
rende Arbeitsabläufe

Die zusammenhängenden
Arbeitsflächen entstehen
durch Integration und
Nutzung von Raumecken
und Nischen

Arbeitswege entfallen oder
sind stark reduziert

Das Systemkonzept von TEC-ONOMIC

TEC-ONOMIC ist in einer vertikalen und in einer horizontalen Ausführung lieferbar.

Für **beide** Systeme bieten wir die Schränke als Stahlkonstruktion oder aus Holzwerkstoffen sowie aus einer Kombination beider Werkstoffe an.

vertikal



Systemaufbau mit Vertikalstruktur

System mit **Vertikalstruktur** in der Medienführung. Medienversorgung übereinander innerhalb von senkrechten Mediensäulen

Tragende Ständerkonstruktion der Energiezellen aus Aluminiumprofilen 160 x 90 mm mit Systemnuten zur Aufnahme der Sanitär- und Elektromodule, sowie Reagenzkonsolen, Hängeschränke und zur weiteren vielseitigen Aufnahme von stufenlos verstellbaren Anbauteilen

Transparenz durch Spritzschutz aus Verbundsicherheitsglas

Durchreichemöglichkeiten zwischen den Mediensäulen

Stufenlose Höhenverstellung aller Ablagen


Optimierte Raumaussnutzung durch Eck- und Stirnflächen, die eine zusammenhängende Arbeitsfläche auch unter ungünstigen Raumbedingungen ermöglichen

Trichterleiste aus verzinktem Stahlblech mit Epoxy-Polyester Pulverbeschichtung, anforderungsbedingt mit eingesetztem PP-Trichter

Modulare Medienversorgung, d.h. Bedienelemente der Elektro- und Sanitärinstallation sind in Modulen angeordnet und können ggf. nachträglich ausgetauscht und erweitert werden

Stufenlos höhenverstellbare Geräteablagen, optional ausziehbar

Funktionelle Arbeitshilfen: Beliebig positionierbare Lochrasterplatten, Kleinteileablagen, Papierrollenhalter, Tragarme für Telefon und Bildschirme, Skripthalter, etc.

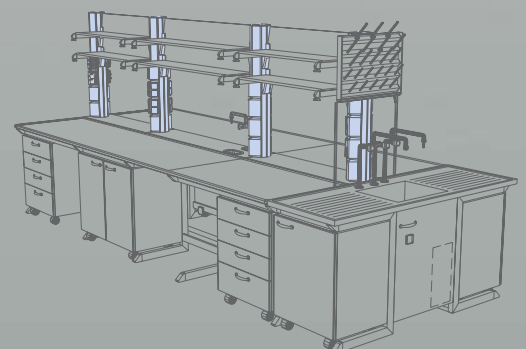



Systemaufbau mit Horizontalstruktur

horizontal


System mit **Horizontalstruktur** in der Medienführung. Medienversorgung innerhalb von großflächigen Medienfeldern nebeneinander angeordnet

Trichterleiste aus verzinktem Stahlblech mit Epoxy-Polyester Pulverbeschichtung, anforderungsbedingt mit eingesetztem PP-Trichter

Tragende Ständerkonstruktion der Energiezellen aus Aluminiumprofilen 60 x 40 mm mit Systemnuten zur Aufnahme von Reagenzkonsolen, Hängeschränken und zur weiteren vielseitigen Aufnahme von stufenlos verstellbaren Anbauteilen

über die gesamte Rasterbreite fugenlose Medienversorgungsleisten

Hohe Bestückungsmöglichkeiten an Sanitär-, Elektro- und Reinstgasinstallationen

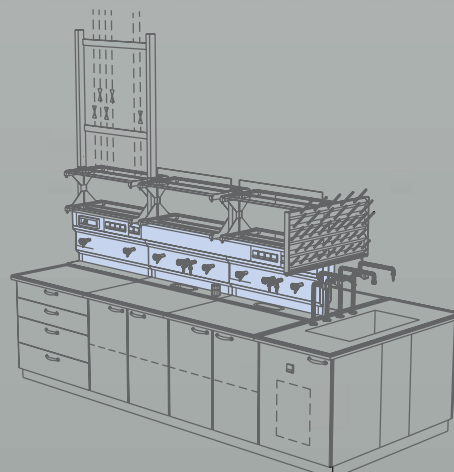




Beispielhafte Labor-
konfiguration mit
integriertem Bild-
schirmarbeitsplatz

Individuelle Lösungen integrieren

In diesem Beispiel zu sehen:
Ausnutzung von Raumecken,
richtlinienkonforme Bildschirm-
arbeitsplätze, Integration eines
begehbaren Abzuges,
Mediensäulen in verschiedenen
Höhen und unterschiedlichste
Schränkversionen für jede
Aufbewahrungsanforderung.
Mit TEC-ONOMIC problemlos
lösbar!

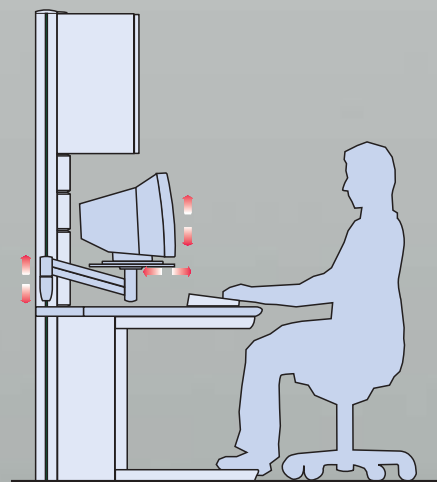

Thema: Bildschirmarbeitsplätze

Aufgrund der Kompetenz von
C+P im Bereich der Büroein-
richtungen, wo heute fast jeder
Arbeitsplatz als Bildschirmar-
beitsplatz eingerichtet wird,

profitieren Sie auch im Bereich
der Laboreinrichtung von
unserem Know-how der Richt-
linien, Gesetze und Normen zur
Umsetzung Ihrer Arbeitsplätze.

Integration einer Laborspülmaschine sowie anderer Laborgeräte von Fremdherstellern



Wandlabortisch mit Hängeschränken

Auf einen Blick:

Integration von Bildschirmarbeitsplätzen für stehende und sitzende Tätigkeit

Ein- oder Unterbau von Laborgeräten (Laborspülmaschinen, Laborkühlschränke u.a.) vieler namhafter Hersteller

Montage der Hängeschränke optional als Wandmontage oder - wenn eine Belastung der Wände nicht möglich ist - an den Mediensäulen

Flexible Medienbestückung im Sanitär- und Elektrobereich

Individuelle Unterschränkgestaltung als Flügeltür-, Schubladen- oder Regalausführung



Doppellabortisch mit Glasablagen und individueller Unterschränkgestaltung

Modularität ist alles: Regal auf Füßen mit individuell verstellbaren Einlegeböden. Korpus mit Schubladen und Flügeltüren ausrüst- bzw. nachrüstbar





*Doppellabortisch mit
kombiniertem
Steh-/Sitzarbeitsplatz-
bereich*

Ergonomisch kombinieren

Durch ergonomisch gestaltete Freiformplatten werden in dieser Laboreinrichtung die verschiedenen Arbeitsplätze sinnvoll miteinander verbunden. Auf Wunsch sind auch individuelle Lösungen realisierbar. Ein positiver Effekt: Arbeiten in wechselnder Körperhaltung (Stehen/Sitzen) beugt Rückenproblemen vor.



Thema: Kombinierte Steh-/Sitzarbeitsplätze

Kombinierte Steh-/Sitzarbeitsplätze ermöglichen die Verbindung von Labor- und Bildschirmarbeitsplätzen sowie die

platzsparende Aufstellung von computergesteuerten Analyse- und Messgeräten und minimieren die Arbeitswege.

Doppellabortisch mit transparenter Trennscheibe aus Verbundsicherheitsglas



Ordnungssystem für bisher ungenutzte Flächen: Lochplatten an Schrankseiten- und -rückwänden.



Auf einen Blick:

Doppellabortische mit Trennscheiben aus transparentem Verbundsicherheitsglas bedeuten sicheres Arbeiten und mehr Tageslicht.

Lochplattensysteme für freie Flächen an den Schrankseiten- und -rückenteilen: optimierte Raumnutzung, höhere Funktionalität durch schnelleren Zugriff auf Hilfsmittel


Ergonomisch gestaltete Kunststoffecken an Türen und Blenden

Platzsparende Kombination von Steh-/Sitzarbeitsplätzen durch Verwendung von Freiformplatten, minimieren die Arbeitswege

Wesentlicher Bestandteil flexibler Arbeitsplätze: Rollcontainer



Abgerundete und stoßfeste Kunststoffecken an Türen und Blenden

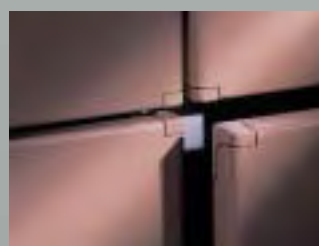



Wandlabortisch als Ecklösung mit Glasablagen und Arbeitsinsel mit Mediensäule und Seitenablage


Bedarfsgerecht organisieren

Die Modulbauweise dieser Wandlaborzeile ermöglicht optimale Raumanpassung. Medienentnahmestellen können ausgetauscht oder ergänzt werden. Integrierte Ovalrohre ermöglichen die einfache Anbringung von Lochblechen, Papierhaltern etc. und sorgen - zusammen mit dem beispielhaften Beschriftungssystem - für Ordnung im Labor.



Thema: Ordnung / Beschriftung

Transparente Beschriftungsschilder dienen zur Kennzeichnung des Inhalts der Schranksysteme. Sie bieten durch ihre Keilform eine optimale Aufsicht auf das Schriftfeld und das sowohl bei den Unterschränken wie auch bei Hängeschränken. Die Beschriftungsschilder können individuell auf den Frontseiten aufgesteckt und dorthin versetzt werden, wo es die Kennzeichnung des Inhalts erfordert.

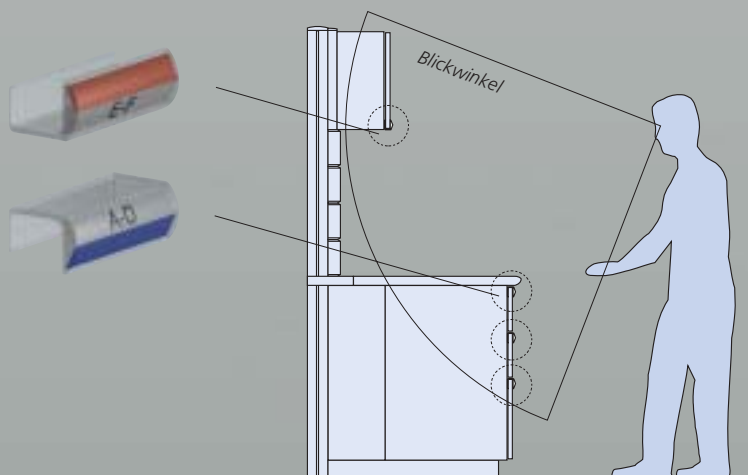

Telefonschwenkarm,
stufenlos höhenver-
stellbar



Lochblech mit
Hakensystem zur
Aufnahme von Werk-
zeugen etc.



Konzepthalter als
Schrägablage

Auf einen Blick:

Intelligentes, variabel gestalt-
bares Beschriftungssystem,
universell an Flügeltüren und
Schubladen ansteckbar

Schubkastenausstattung
kann durch ein variables
Stecksystem jederzeit auf
arbeitsspezifische Bedürfnisse
angepasst werden

Verschiedene Ordnungs- und
Organisationselemente kön-
nen direkt an Systembautei-
len befestigt werden (siehe
Abb. auf diesen Seiten)



Konzepthalter, belie-
big positionierbar



Papierrollenhalter

Schubladen mit
variablem Stecksystem
und Spezial-Beschrif-
tungsschildern





Laboreinrichtung mit optimierten Ecklösungen, z.B. für das analytische Labor

Raum optimal nutzen

Arbeits- und Ablageflächen im Labor sind kostbar. Mit TEC-ONOMIC wird kein Quadratzentimeter verschenkt: Innenecklösungen, stirnseitige Regaleinheiten und ausziehbare Ablageböden sorgen für eine optimierte Flächennutzung selbst im kleinsten Laborraum.



Wandarbeitstisch und Tischabzug mit AIR-TEC Abluftsystem, Auszugschrank mit integrierter Innenausstattung

*Raumnutzung in der Höhe
durch ausziehbare Geräte-
ablagen für leichteren Zugriff
(z.B. bei Geräteanschluss)*



*Optimierte Eck-
lösungen - hier
erreicht durch Frei-
form-Inneneckplatten,
für verbesserte
Raumausnutzung*

Auf einen Blick:

Durch Raumnutzung zusätz-
lich in der Höhe wird ein
optimaler Zugriff auf Geräte
und Ablagen möglich

Optimale und effiziente Aus-
nutzung von Raumecken
und Nischen ergeben
zusammenhängende
Arbeitsflächen und
verbesserte Arbeitsabläufe

Abfallentsorgungssysteme
für unterschiedliche Stoffe
durch ausziehbare Abfall-
systeme



*Integriertes Abfall-
system zur getrenn-
ten Entsorgung*



*Zusätzliche Stell-
fläche durch seitlich
anzubringende
Ablageböden*

Das Schrankkonzept von TEC-ONOMIC

Die Wandlungsfähigkeit durch die Nutzung von Rollen statt Füßen oder Sockel (beim gleichen Schrank) erlaubt es, Teile von Laborzeilen auszutauschen und neu mit anderen Geräte-

konfigurationen zu kombinieren. Die Anlagen müssen dabei nicht abgebaut und neu installiert werden. Hierdurch wird es möglich, komplexe Analyseanlagen effizienter für wechselnde,

projektbezogene Aufgaben an mehreren Arbeitsplätzen ohne zusätzlichen Installationsaufwand einzusetzen.

Beim TEC-ONOMIC-Schrankkonzept können Sie zwischen vier verschiedenen Ausführungen wählen:


Füße



Rollen



Sockel

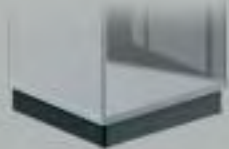


im C-Fußgestell eingehängter Unterbau




Arbeitsanordnung A



Umbauphase

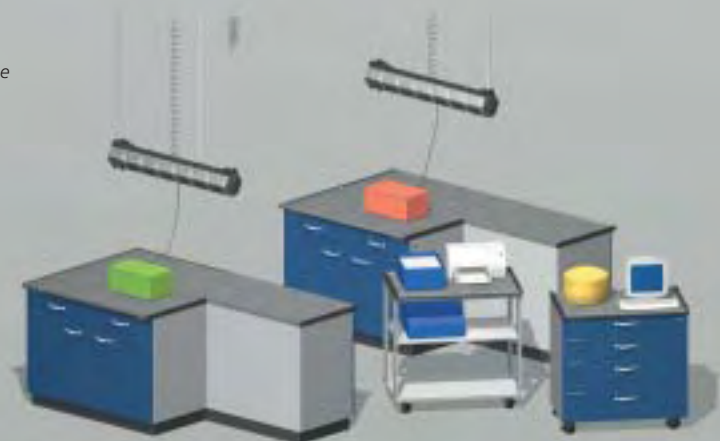

Arbeitsanordnung B

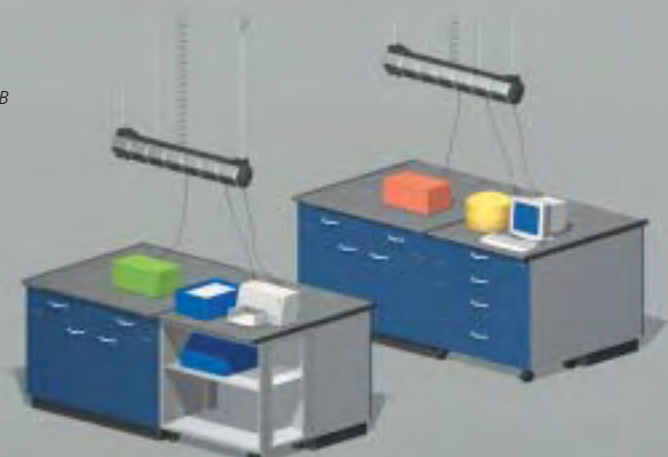



Stahl oder Holz/Kunststoff – beides ist möglich!

Neben der hochwertig stabilen Stahlblechkonstruktion bietet das System TEC-ONOMIC dieselbe Typenvielfalt in einer Holz-/Kunststoffausführung: Gehäuse und Fronten bestehen aus beidseitig melaminharzbeschichteten 19 mm starken Pressspanplatten E1, umlau-

fende Kanten der Flügeltüren und Schubkastenblenden sind mit ABS-Kantenumleimer belegt. In den Seitenwänden des Schrankgehäuses kommt eine durchgehende Rasterleiste zum Einsatz. Dadurch ergibt sich eine wesentlich zuverlässigere Aufnahme für Bodenträger gegenüber Einzellochreihen in der Gehäuseseitenwand. Die Rasterleisten dienen gleichzeitig


als Aufnahmepunkte für die Systemschubkästen.

Die Einlegeböden sind aus pulverbeschichtetem Stahlblech (elo-verzinkt), dadurch ergibt sich eine höhere Tragkraft (ohne Durchbiegung). Die Schubkästen sind aus pulverbeschichtetem Stahlblech (elo-verzinkt) mit Vollauszügen.

Die Stahlschränke auf einen Blick:

Alle Schrankausführungen aus Stahl basieren auf einem Grundkörpersystem mit tragenden Elementen aus Aluminiumprofilen

Der Umbau einer Schrankausführung in eine andere kann ohne Spezialkenntnisse und -werkzeuge erfolgen

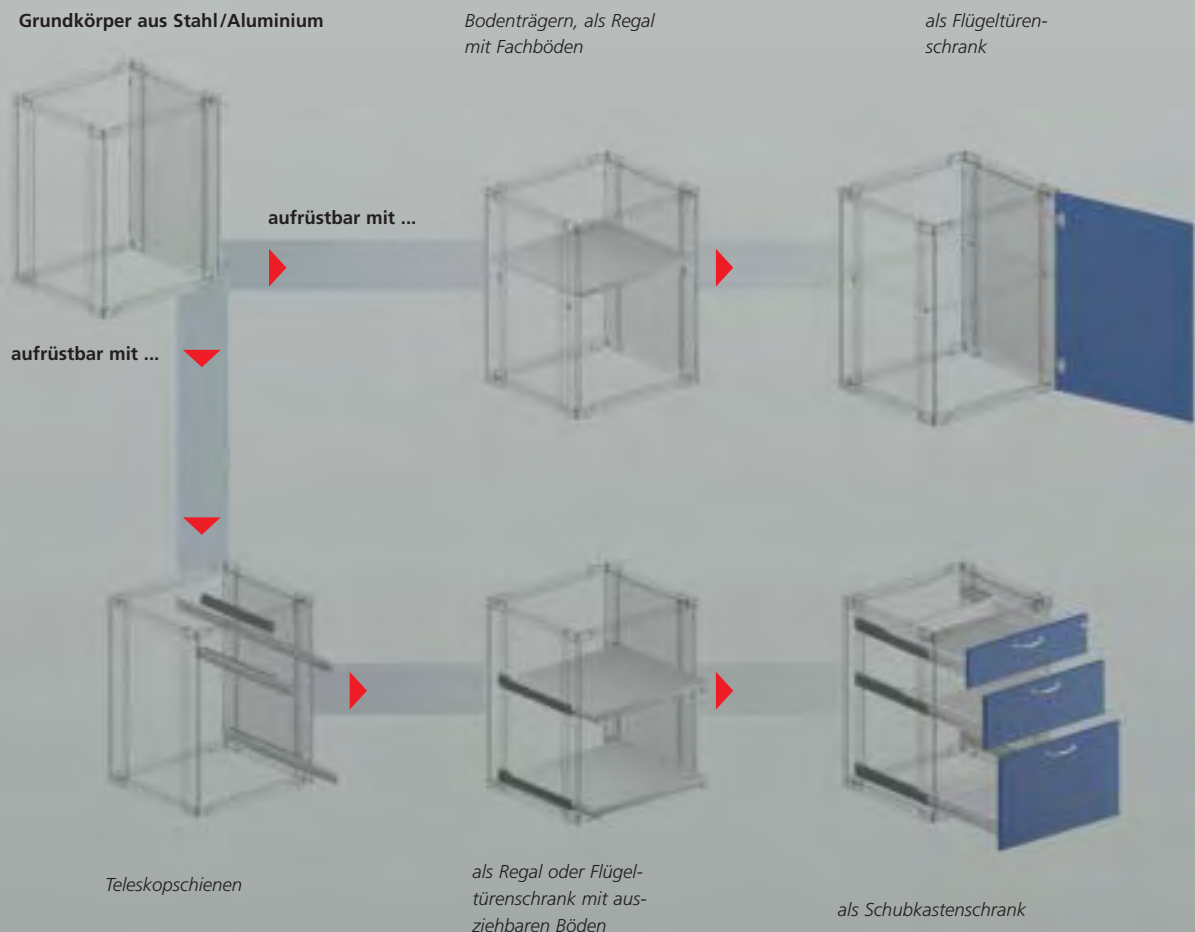


Das AIR-TEC-Abluftsystem

Das AIR-TEC-Abluftsystem erfüllt alle Vorschriften und bietet im Hinblick auf praxisrelevante Situationen zum Teil noch deutliche Reserven darüber hinaus.

Erreicht wird dies durch eine nahezu vollflächige Absaugung über die speziell gelochte Rückwand des Abzugs. Diese Technik reduziert eine Verwirbelung oder eine An-

reicherung von Schadgasen im Bereich von Geräten, Apparaten und Aufbauten. Es entsteht ein nahezu gleichbleibender, laminarer Abluftstrom.

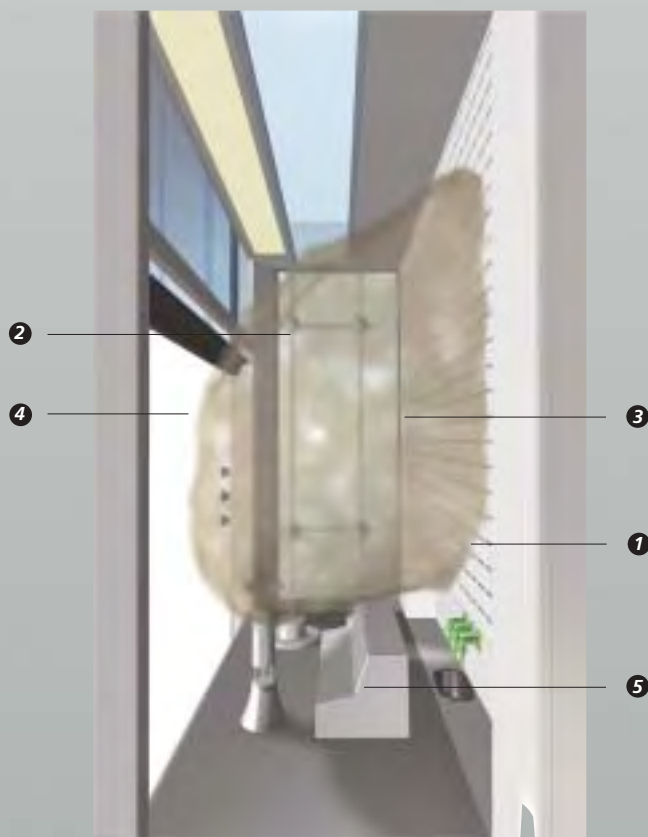

Auf einen Blick:

- ❶ Speziell gelochte Abzugsrückwand
- ❷ Versuchsaufbauten
- ❸ Strömung im Innenraum
- ❹ Volle Absaugleistung auch bei geöffnetem Fenster
- ❺ Geräte, Aufbauten



Tischabzug



Tiefabzug



Begehbarer Abzug

Hervorragendes Rückhaltevermögen:

Gemäß EN 14175 muss ein Abzug die Fähigkeit besitzen, das Rückhaltevermögen auch bei externen Störungen vor dem Abzug aufrecht zu erhalten.

Diese Störungen werden in einem „Robustheitstest“ simuliert, bei dem eine Platte vor dem Abzug hin- und herbewegt wird und für Luftverwirbelungen sorgt. Hierbei bewirkt die Geometrie der vorderen Säulen der TEC-ONOMIC Abzüge eine Strömungsumlenkung (siehe Grafik) und verhindert so erfolgreich den Austritt von Luft aus dem Abzugsinneren.



TEC-ONOMIC
Tischabzug mit
AIR-TEC-Abluftsystem
und Unterschränken



Gasförmige Medien
(Ventil außen, Ent-
nahmestelle innen)



Stromversorgung 230 V
(Schalter außen,
Steckdose innen)



Strapazierfähige Arbeitsstühle, Hocker und Stehhilfen

Die abgebildeten Arbeitsstühle und Drehhocker sind mit bequemer und pflegeleichter Kunstleder- oder Kunststoff-Oberfläche ausgestattet und bieten von daher einen optimalen leistungsfördernden Sitzkomfort. Auf Wunsch sind einige Modelle auch mit der konventionellen Sitzfläche aus Buche-Massivholz lieferbar.





Objektbeispiel BASF Aktiengesellschaft

BASF Aktiengesellschaft, Agrarzentrum Limburgerhof, Geb. Li 721

Die Drehscheibe der BASF für die weltweiten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Pflanzenschutz erhielt ein neues und modernes Laborgebäude

Im Rahmen dieser Investition wurde das Gebäude Li 721 geplant. Nur 17 Monate nach der Grundsteinlegung konnte die Einweihung gefeiert werden, so dass der Betrieb umgehend aufgenommen

werden konnte. Die Montagezeit für die Laboreinrichtung betrug ca. 4 Monate.

Darin enthalten sind neben der charakteristischen Laboreinrichtung mit Abzügen, Doppel- und Wandlabortischen auch einige nutzungsbedingte Spezialanfertigungen, wie begehbare Kabinen, Tisch- und begehbare Abzüge in Sondertiefen u.v.m. Die PC-Arbeitsplätze innerhalb der Labore wurden mit Schreibtischen der Serie „Workflow“, teilweise mit höhenverstellbaren

Bildschirmarbeitsplatten, eingerichtet.

Darüber hinaus wurden die Garderobebereiche mit Schränken der Serie S 6000 Cambio mit HPL-Dekorfronten eingerichtet, die den Umkleeräumen einen sehr wohnlichen Charakter vermitteln. Durch versetzbare Trennwände kann die Anzahl der Schränke variiert und somit auf wechselnde Personalstärken reagiert werden.

TEC-ONOMIC Farbkonzept

1. Bauteilgruppe: Gehäuse, Module

- ☐ hier Lichtgrau Ral 7035
- 1.1 Schrankgehäuse
- 1.2 Abzugsaufbau und Verkleidung
- 1.3 Medienmodule und Verblendung
- 1.4 Stahlblech-Geräteablagen*
- 1.5 Trichterleiste,
- 1.6 Seiten- und Gestellblenden

2. Bauteilgruppe: Fronten

- ☐ hier Lichtgrau RAL 7035
 - 2.1 Türen
 - 2.2 Schubladenblenden
- Griffe**
- ☐ mattverchromt oder gem. Farbkonzept

3. Bauteilgruppe: Gestelle

- ☒ hier RAL 9005 Tiefschwarz
- 3.1 C-Fuß-Gestell
- 3.2 Mediensäulenprofil
- 3.3 Schiebefensterahmen (Abzüge)
- 3.4 Lichtleiste

4. Bauteilgruppe: Anbauteile

- ☒ immer Schwarz
- 4.1 Armaturen
- 4.2 Steckdosen

Beispiel Standardlabor
Ausführung Lichtgrau
RAL 7035, ohne
Mehrpreis

- 4.3 Reagenzkonsolen
- 4.4 Glas-Einfassprofile
- 4.5 Trichterbecken
- 4.6 Abdeckstopfen für Mediensäulenprofile, C-Gestelle
- 4.7 Abschlussleiste Postformingplatten
- 4.8 Griffleiste des Abzugs-Schiebefensterrahmens
- 4.9 Schrankfüße*
- 4.10 Sockel
- 4.11 Rollen

5. Bauteilgruppe: Platten

- ☐ hier Atlantis Kristall Dekor 5000-02
- 5.1 Arbeitsplatten Eckplatten*, Freiformplatten*, Bildschirmarbeitsplatten*
- 5.2 Abzugsplatten

* Bauteile sind nicht in der Abbildung dargestellt


Beispiele für unterschiedliche Farbkombinationsmöglichkeiten

Bestellbeispiel 1




Bauteilgruppe	Farbe
Gehäuse	Lichtgrau RAL 7035
Fronten	Burgundrot RDS 010 20 25
Gestelle	Tiefschwarz RAL 9005

Bestellbeispiel 3

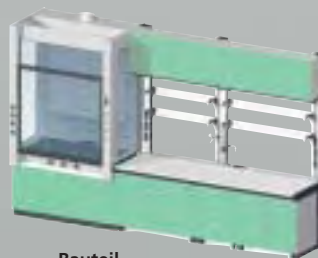


Bauteilgruppe	Farbe
Gehäuse	Weißaluminium RAL 9006
Fronten	Lichtgrün RAL 6027
Gestelle	Tiefschwarz RAL 9005

Bestellbeispiel 2

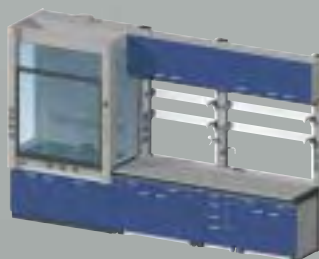

Bauteilgruppe	Farbe, Dekor
Gehäuse	Vulkangrau 000 50 00
Fronten	Lapisblau RDS 270 20 29
Gestelle	Tiefschwarz RAL 9005

Bestellbeispiel 4

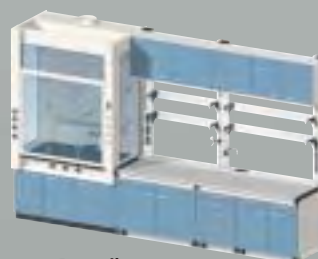

Bauteilgruppe	Farbe
Gehäuse	Reinweiß RAL 9010
Fronten	Horizontblau RDS 240 60 15
Gestelle	Reinweiß RAL 9010

Farbharmonien

kombinierbare Frontfarben

2. Fronten Standard 2. Fronten Mehrpreis

- gut kombinierbar
- ◐ bedingt kombinierbar
- schlecht kombinierbar
- Standardausführung

			Lichtgrau RAL 7035 Vulkangrau 000 50 00 Moosgrün RAL 6005 Lapisblau 270 20 29 Burgundrot 010 20 25 Maronbraun 040 20 05 Lichtgrün 6027 Horizontblau 240 60 15 Perlweiß RAL 1013 Reinweiß RAL 9010 Weißaluminium RAL 9006 Graualuminium RAL 9007												
1. Gehäuse, Module	Standard	Lichtgrau RAL 7035	■	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	gegen Mehrpreis	Reinweiß RAL 9010	■	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
		Weißaluminium RAL 9006	■	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
		Graualuminium RAL 9007	■	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
		Vulkangrau 000 50 00	■	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
3. Gestelle	Standard	Tiefschwarz RAL 9005	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	gegen Mehrpreis	Gehäusefarben (vorzugsweise)	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		Frontfarben	■	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
6. Platten (Preise gemäß separater Liste)	Edelstahl	Edelstahl	■	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	Polypropylen	Hellgrau (ähnlich)	■	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	Corian, Varicor,	Atlantis kristall (ähnlich)	■	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	Askilan, Keramik	Kaleidoskopgrau (ähnlich)	■	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	HPL-Postforming,	Hellgrau Dekor	■	●	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	Melamin	Atlantis kristall Dek. 5000-02	■	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
	Melamin	Malibugrau Dekor 5000-09	■	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
		Ahorn Dekor 5000-04	■	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
		Buche Dekor 5000-05	■	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○
		Birnb Baum Dekor 5000-06	■	○	○	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○

RDS = RAL-Design-System®

Generell wird davon ausgegangen, dass alle Bauteile einer Gruppe in demselben Farbton beschichtet werden.

Vom Standard abweichende Beschichtungen bedingen einen Mehrpreis.

Farbe und Beschichtung

Gehäuse ohne Mehrpreis Fronten ohne Mehrpreis Gestelle Mehrpreis		Gehäuse Mehrpreis Fronten ohne Mehrpreis Gestelle Mehrpreis		Gestelle ohne Mehrpreis	
	Lichtgrau Ral 7035		Vulkangrau RDS 000 50 00		Tiefschwarz RAL 9005
Gehäuse Mehrpreis Fronten Mehrpreis Gestelle Mehrpreis					
	Reinweiß Ral 9010	Weißaluminium Ral 9006	Graualuminium Ral 9007		
Fronten ohne Mehrpreis Gestelle Mehrpreis					
	Moosgrün RAL 6005	Lapisblau RDS 270 20 29	Burgundrot RDS 010 20 25	Maronbraun RDS 040 20 05	
Fronten Mehrpreis Gestelle Mehrpreis					
	Lichtgrün RAL 6027	Horizontblau RDS 240 60 15	Perlweiß RAL 1013		

Plattenmaterial/Dekore

(Preise gemäß separater Liste)

		
Polypropylen	Edelstahl	
		
Hellgrau (ähnlich)	Kaleidoskopgrau (ähnlich)	Atlantis Kristall (ähnlich)
		
Lichtgrau (ähnlich)	HPL-Postforming Melamin	Atlantis Kristall Dekor 5000-02
		
HPL-Postforming Melamin	Malibugrau Dekor 5000-09	Hellgrau Dekor 5000-00
		
Ahorn Dekor 5000-04	Buche Dekor 5000-05	Birnb Baum Dekor 5000-06

Was Sie noch wissen sollten...

Technisches Handbuch TEC-ONOMIC

Der vorliegende Prospekt gibt Ihnen erste Einblicke in die Leistungsfähigkeit des Labor-



Einrichtungssystems TEC-ONOMIC. Wesentlich ausführlichere Beschreibungen und Details sind im Technischen Handbuch enthalten, welches wir Ihnen auf Wunsch gerne zusenden. Sie finden hier alle Angaben und Hintergrundinformationen, die Sie zur

Einrichtung Ihres Labors benötigen, z.B. die komplette Produktphilosophie, das Gesamtkonzept der Medienversorgung, alle Angaben zu Abzugs-, Tisch- und Schranksystemen, Planungshilfen, Artikelnummern usw. Ein exzellentes Werkzeug für alle, die tiefer ins Thema einsteigen möchten.

Das C+P Dienstleistungs- konzept

Vor der Einrichtung steht die kompetente Beratung und fachgerechte Planung. Auf Wunsch stehen wir Ihnen dabei gerne zur Seite. Unsere Laborprofis

stellen Ihnen die für Ihre Anforderung individuell geplante Lösung zusammen, damit Sie bei der späteren Nutzung von allen Vorzügen des Labor-Einrichtungssystems TEC-ONOMIC profitieren. Für Abwicklung, Lieferung, Montage und After-

Sales-Service steht Ihnen Ihr Projektbetreuer mit Rat und Tat zur Verfügung. Damit Sie nicht nur mit Ihrer Laboreinrichtung, sondern auch mit unserem Service rundum zufrieden sind.

Die C+P Einrichtungs- programme

C+P bietet Ihnen mehr als nur Laboreinrichtungen! Unsere Möbelprogramme für Büro und Archiv, Lager und Werkstatt

sowie Umkleide und Garderobe machen uns zum idealen Partner für Ihre Kompletteneinrichtung. Alles aus einer Hand von C+P! Auf der rechten Seite sehen Sie einige Beispiele unseres Gesamtprogramms.

Bitte fordern Sie weitere Unterlagen an oder vereinbaren Sie einen Gesprächstermin.

Noch Fragen?
Wir sind gerne für Sie da:




C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG

Boxbachstr. 1
D - 35236 Breidenbach
Tel. 0 64 65 / 919-350
Fax 0 64 65 / 919-359
e-mail labor@cpmoebel.de


Bei uns finden Sie noch mehr...

Das C+P Basisprogramm

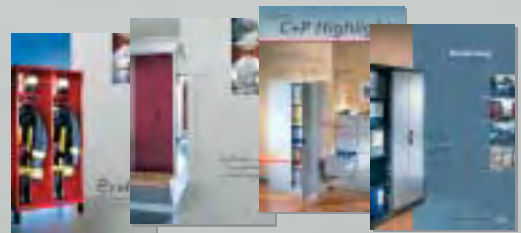

Das C+P Basisprogramm bietet Ihnen alles rund um die Themen Tisch und Arbeitsplatz, Aufbewahrung und Archivierung, Lager und Werkstatt sowie Umkleide und Garderobe.

Die C+P Objekteinrichtungen

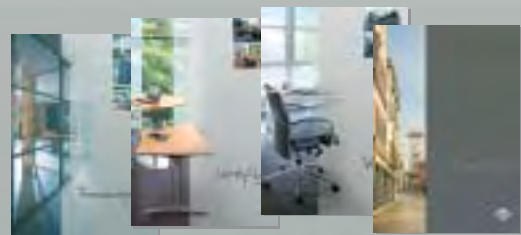

Die C+P Objekteinrichtungen sind allesamt Systemlösungen für größere Einrichtungsvorhaben. Wählen Sie aus Objektmöbeln der ID-Collection, Tischsystemen der Serie Workflow, versetzbaren Trennwandsystemen und vielem mehr.

C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Boxbachstr. 1, D - 35236 Breidenbach
Info-Telefon: 0 64 65 / 919 - 350 Info-
Fax: 0 64 65 / 919 - 359
e-Mail: labor@cpmoebel.de
www.cpmoebel.de

Ihr Vertriebspartner:
EDP Vertriebs GmbH
IT-Products
Otto-Hahn-Strasse 1c
69190 Walldorf
Tel: +49 6227 8287 0
Fax: +49 6227 8287 11
e-Mail: sales@edp-germany.de
www.edp-germany.de

Möbel für Menschen

